
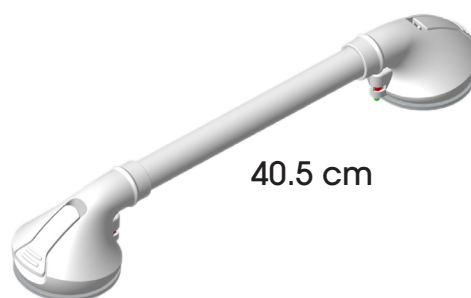


BARRE D'APPUI À VENTOUSES

NOTICE DE MONTAGE

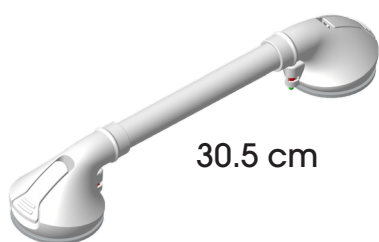

BARRE D'APPUI À VENTOUSES

Tous droits réservés, y compris traduction. Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, sous quelque forme que ce soit (imprimée, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) sans l'autorisation écrite du publicateur, ni traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques.

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir une barre de douche de la marque Vitadomia et nous vous remercions de votre confiance. Nous sommes sûrs qu'elle vous apportera quotidiennement un maximum de confort. Vitadomia propose une large gamme de produits d'aide à domicile. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre revendeur pour de plus amples renseignements.

Charge maximale 65 kg.



1. Avant l'installation, vérifiez que les ventouses sont exemptes de débris.
2. Soulevez les languettes et positionnez la barre d'aide à l'équilibre à ventouse avec indicateur sur une surface plate, propre, sèche et lisse. (figure 1)
3. Assurez-vous que la surface soit plate, propre, sèche et lisse.
4. N'installez pas la barre sur des lignes de jointoiement ou une surface rugueuse.
5. N'installez pas la barre sur une surface peinte ou une cloison sèche.
6. Après avoir positionné la barre, appuyez sur les languettes pour la maintenir en place. Lorsque les indicateurs passent du rouge au vert comme dans la figure 2, la barre est correctement fixée.
7. Après l'installation, essayez de secouer la barre d'aide à l'équilibre à ventouse avec indicateur avec votre main, pour vous assurer qu'elle est bien fixée à la surface. Si ce n'est pas le cas, réinstallez-la.

Matériel : tube résistant à la rouille en ABS/PVC

Barre d'aide à l'équilibre de 30,5 cm à ventouse avec indicateur : env. 0,55 kg




1.2 lbs / 0.55 kgs

Barre d'aide à l'équilibre de 40,5 cm à ventouse avec indicateur : env. 0,63 kg

Fabriqué à Taïwan

AVERTISSEMENT:

- Lisez les instructions avant l'installation.
- Avant l'installation, vérifiez si toutes les pièces sont présentes dans la quantité indiquée.
- Poids maximal de l'utilisateur : 65 kg
- Avant chaque utilisation, vérifiez que la barre d'aide à l'équilibre à ventouse avec indicateur est correctement fixée. Réinstallez-la si nécessaire.
- Vitadomia décline toute responsabilité en cas de blessure ou de dommage provoqué par une mauvaise installation ou une mauvaise utilisation de ce produit.

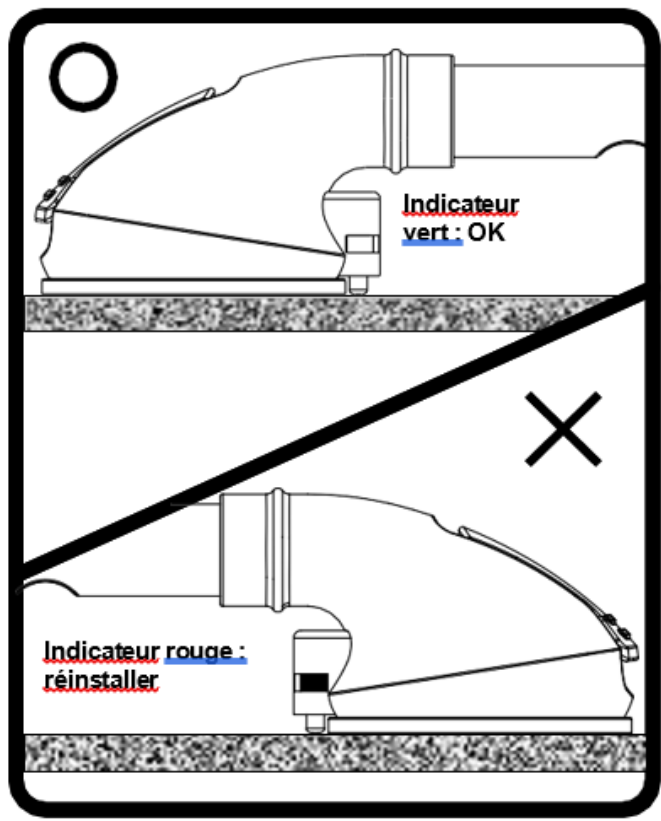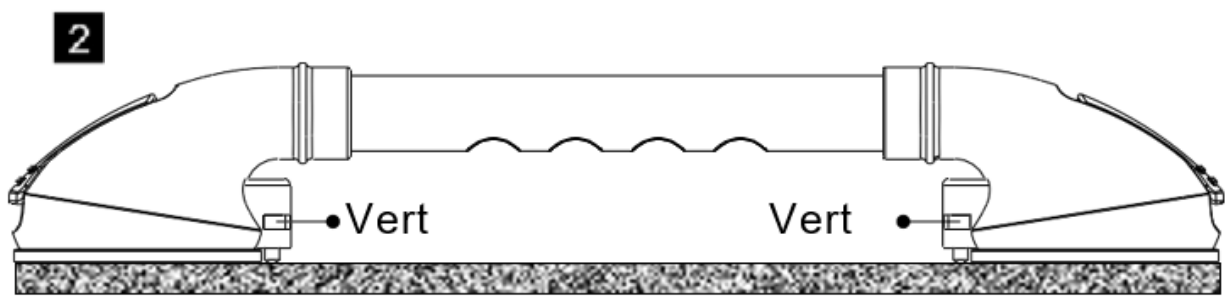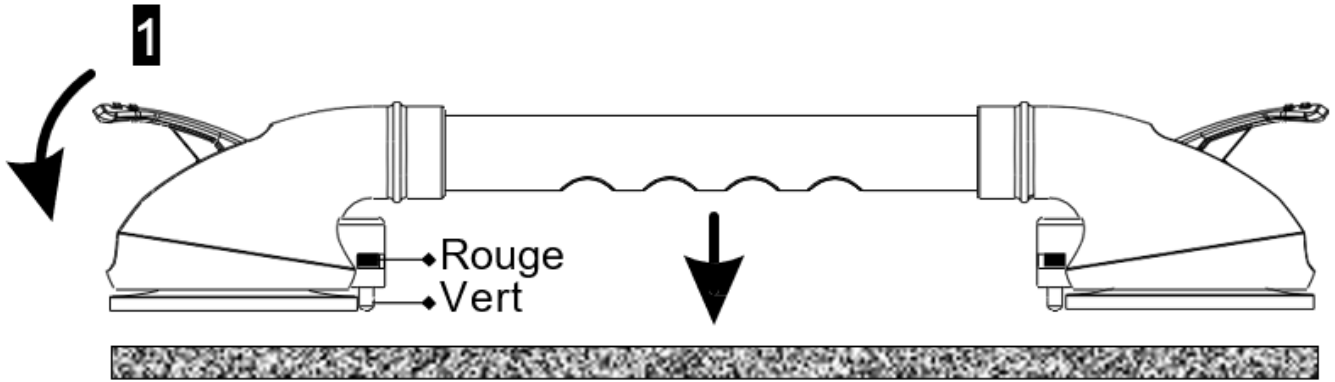

Ne pas recouvrir de lignes de jointoiment



Nettoyer le mur avant l'installation



Ne pas installer sur une paroi rugueuse



Nettoyer la surface des ventouses avant l'installation



Fabricant :

SHIH KUO ENTERPRISE CO., LTD.
 No. 71, Lane 54, Sec. 2, An-Ho Rd., Tainan 709, TAIWAN
 Website : <http://www.shihkuo.com> E-mail: shih.kuo@msa.hinet.net, Tel : 06-3557392 FAX: 06-3565601

Importateur :


Oxypharm
 39 rue des Augustins
 76178 Rouen Cedex
 France

Distributeur :


Oxypharm
 39 rue des Augustins
 76178 Rouen Cedex
 France

ONDERSTEUNENDE HANDGREEP MET ZUIGNAPPEN EN INDICATOR

GEBRUIKSAANWIJZING

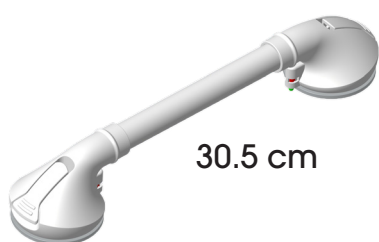

30.5 cm

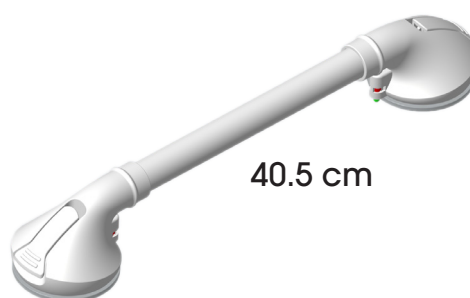

40.5 cm

ONDERSTEUNENDE HANDGREEP MET ZUIGNAPPEN EN INDICATOR

Alle rechten voorbehouden, inclusief vertaling. Niets uit deze handleiding mag worden gereproduceerd in enige vorm (afdruk, fotokopie, microfilm of enig ander proces) zonder schriftelijke toestemming van de uitgever, noch mag het worden verwerkt, gedupliceerd of gedistribueerd met behulp van elektronische systemen.

INLEIDING

Bedankt voor je vertrouwen in een Vitadomia douchestang. We zijn er zeker van dat deze u elke dag maximaal comfort zal bieden. Vitadomia biedt een ruim assortiment thuisverzorgingsproducten. Aarzel niet om contact op te nemen met uw verkoper voor meer informatie.

Maximale belasting 65 kg.



1. Controleer voor het installeren of de zuignappen vrij zijn van vuil.
2. Open de klepjes en plaats de Ondersteunende handgreep met zuignappen en indicator op een schoon, glad, droog oppervlak. (figuur 1)
3. Zorg ervoor dat het oppervlak vlak, schoon, droog en glad is.
4. Kan niet geïnstalleerd worden op voeglijnen of andere ruwe oppervlakken.
5. Kan niet geïnstalleerd worden op geverfde oppervlakken of gipsplaten.
6. Na het plaatsen, de klepjes goed sluiten om de handgreep te bevestigen. Als de indicators van rood naar groen veranderen (zie figuur 2), is de handgreep correct bevestigd.
7. Na installatie, schud de Ondersteunende handgreep met zuignappen en indicator met de hand om ervoor te zorgen dat deze goed op het oppervlak is bevestigd. Zo niet, installeer hem dan opnieuw.

Materiaal: ABS/ PVC/ Roestbestendige buis 30cm
Ondersteunende handgreep met zuignappen en indicator(ongeveer):

1,2 lbs / 0,55 kg



40cm Ondersteunende handgreep met zuignappen en indicator(ongeveer):

1,4 lbs / 0,63 kg

Gemaakt in Taiwan

WAARSCHUWING :

- Lees de instructies alvorens de installatie te beginnen.
- Controleer voor de installatie of de hoeveelheden van de onderdelen kloppen.
- Max. Gebruikersgewicht (143 lbs. / 65 kg)
- Voor elk gebruik controleren of de Ondersteunende handgreep met zuignappen en indicator stevig is gemonteerd. Installeer indien nodig opnieuw.
- Vitadomia is niet aansprakelijk voor eventuele schade of letsel veroorzaakt door onjuiste installatie of gebruik van dit product.

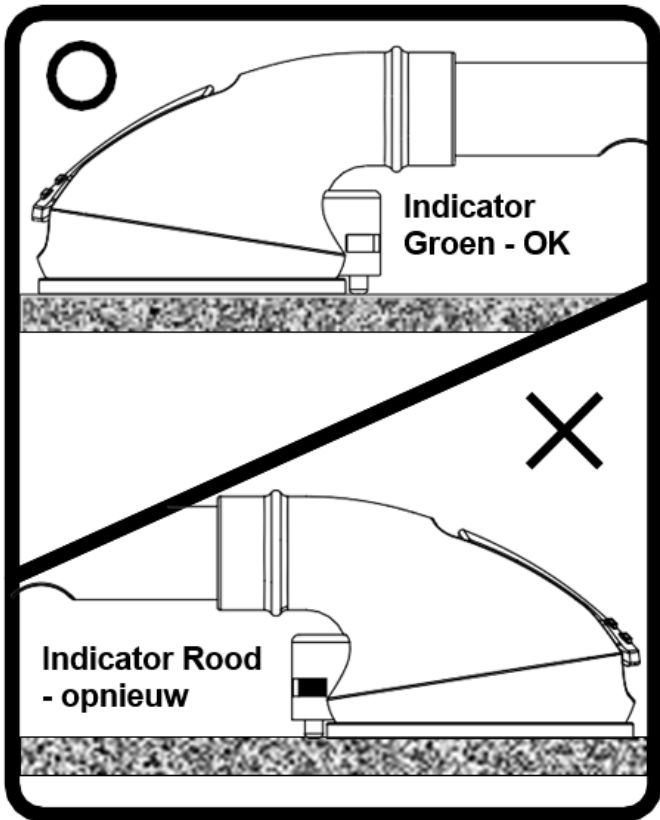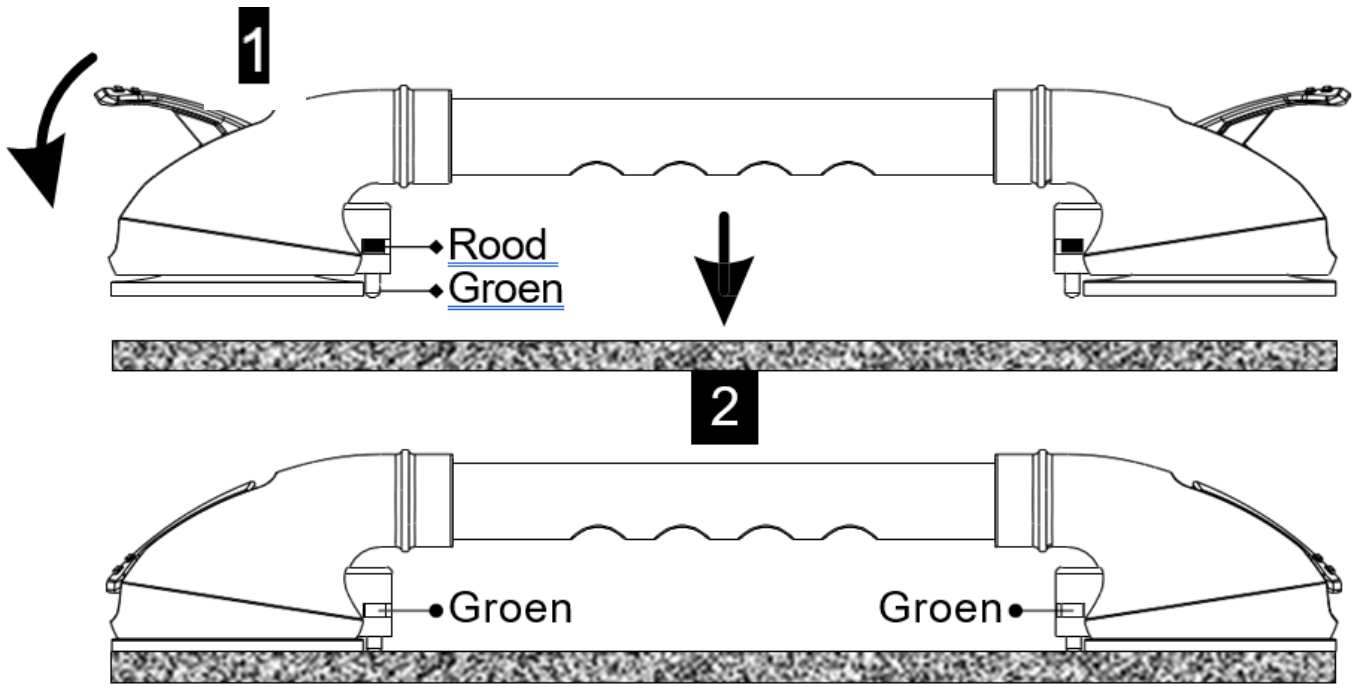


Overlap geen
voeglijnen



Niet plaatsen
op een ruwe
muur



De muur
reinigen voor
installatie

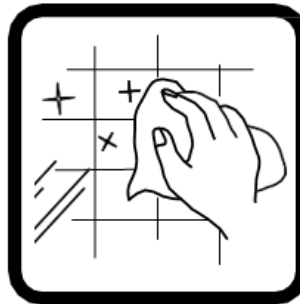

Het oppervlak van
de zuignappen
reinigen voor
installatie



Fabrikant :

SHIH KUO ENTERPRISE CO., LTD.
No. 71, Lane 54, Sec. 2, An-Ho Rd., Tainan 709, TAIWAN
Website : <http://www.shihkuo.com> E-mail: shih.kuo@msa.hinet.net, Tel : 06-3557392 FAX: 06-3565601

Importateur :


Oxypharm
39 rue des Augustins
76178 Rouen Cedex
France

Verdeler :


Oxypharm
39 rue des Augustins
76178 Rouen Cedex
France

SAUGHALTEGRIFF MIT ANZEIGE

GEBRAUCHSANWEISUNG

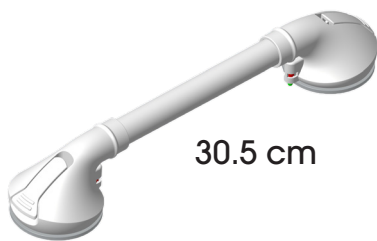

30.5 cm

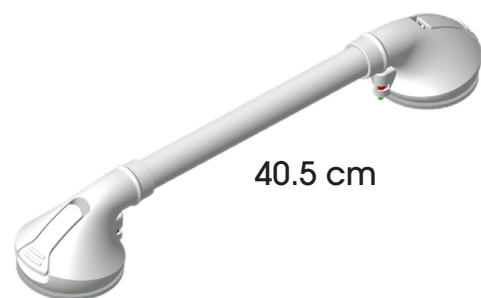

40.5 cm

KLASSISCHER HALTEGRIF FÜR DIE WAND

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil dieses Handbuchs darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

EINLEITUNG

Sie haben gerade eine Duschstange der Marke Vitadomia erworben und wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen. Wir sind sicher, dass sie Ihnen täglich ein Höchstmaß an Komfort bieten wird. Vitadomia bietet eine breite Palette an Produkten für die häusliche Pflege an. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Maximale Belastung 65 kg.



1. Stellen Sie vor der Installation sicher, dass die Saugnäpfe nicht verschmutzt sind.
2. Drücken Sie die Hebel nach oben und positionieren Sie den Saughaltegriff mit Anzeigen auf einer sauberen, glatten und trockenen Oberfläche. (Abb. 1)
3. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche eben, sauber, trocken und glatt ist.
4. Er darf nicht auf Fugen oder einer rauen Oberfläche installiert werden.
5. Er darf nicht auf gestrichenen Oberflächen oder Trockenbauwänden installiert werden.
6. Drücken Sie nach der Positionierung des Griffs zur Sicherung auf die Hebel. Wenn die Anzeigen wie in Abbildung 2 von Rot auf Grün schalten, ist der Haltegriff richtig befestigt.
7. Nach der Installation rütteln Sie bitte den Saughaltegriff mit der Hand, um sicherzustellen, dass dieser sicher an der Fläche befestigt ist. Wenn dies nicht der Fall ist, montieren Sie diesen erneut.

Material: ABS/ PVC/ Rostbeständiges Rohr 12»

Saughaltegriff mit Anzeige:

ca. 0,55 kg




16» Saughaltegriff mit Anzeige:

ca. 0,63 kg

In Taiwan hergestellt

WARNUNG:

- Lesen Sie bitte die Anleitung vor der Montage.
- Bitte überprüfen Sie vor der Montage, ob die richtige Anzahl der Teile geliefert wurde.
- Max. Benutzergewicht (65 kgs)
- Vor jedem Gebrauch prüfen, ob der Saughaltegriff mit Anzeige sicher montiert ist. Falls erforderlich, erneut montieren.
- Vitadomia übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Installation oder Verwendung dieses Produkts verursacht werden.

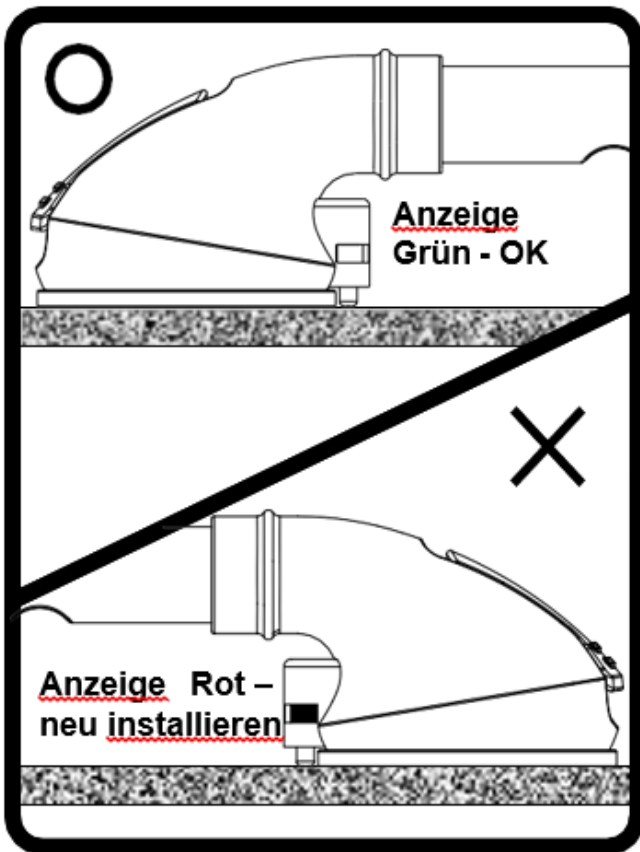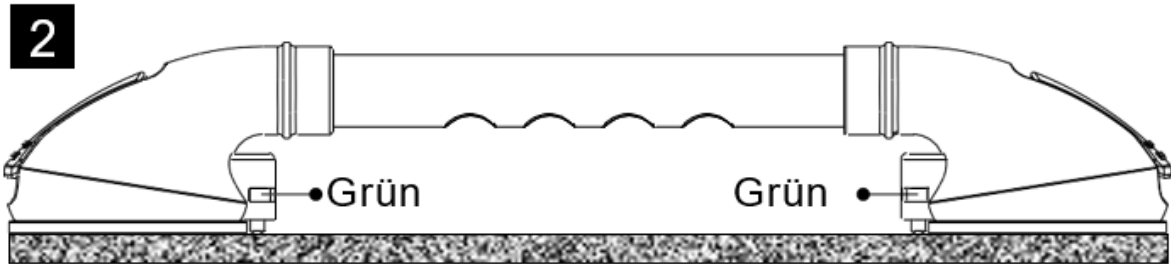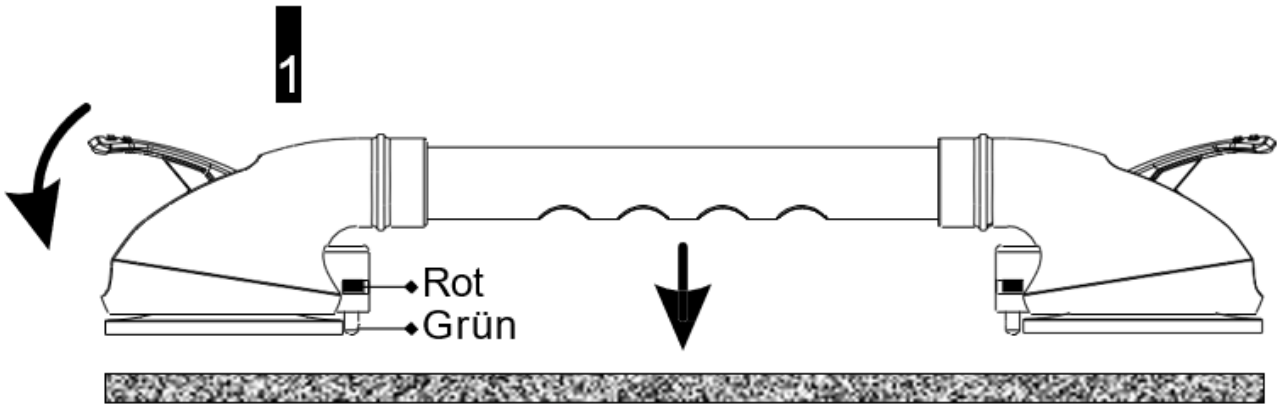

Nicht auf Fugenlinien montieren



Vor der Montage die Wand reinigen

Nicht an unebener Wand montieren



Vor der Montage die Saugnäpfe reinigen



Hersteller :

SHIH KUO ENTERPRISE CO., LTD.
No. 71, Lane 54, Sec. 2, An-Ho Rd., Tainan 709, TAIWAN
Website : <http://www.shihkuo.com> E-mail: shih.kuo@msa.hinet.net, Tel : 06-3557392 FAX: 06-3565601

Importateur :

Oxypharm
39 rue des Augustins
76178 Rouen Cedex
France

Verdeler :

Oxypharm
39 rue des Augustins
76178 Rouen Cedex
France